

CATCHSYSTEM

Knochenmarks-Biopsie-Set mit "Catch-System" *Bone Marrow biopsy set with CatchSystem device*

Knochenmarks-Biopsie-Nadel mit Kronenschliff-Spitze und anatomisch geformtem Handgriff. Das Set enthält den "Catch-System"-Mandrin, der es erlaubt, auf die Deflektions-Technik zu verzichten um das Spezimen zu lösen. Mit Hilfe des Ausstoßers und dem Sicherheitsnippel ist die Entfernung der Biopsie leicht möglich. Entfernbare Mandrin mit Trokar-Spitze.

Bone Marrow Biopsy Needle with crown needle tip and anatomic handle.

It includes the CatchSystem cradle which allows to avoid the deflection technique procedure. It includes the extraction wire and safety device to get the biopsy core out.


Extractable trocar tip stylet.



Trokar-Spitze
Trocar tip



Kanüle mit "Kronenschliff"
Crown tip cannula

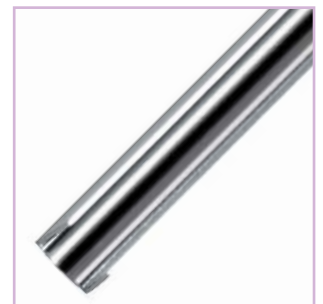

CatchSystem
CatchSystem cradle

	Ø Gauge	Ø mm	Länge Length 100 mm	Länge Length 150 mm
●	08	4,00	CS08-10	CS08-15
●	09	3,50	CS09-10	CS09-15
○	11	3,20	CS11-10	CS11-15
●	13	2,50	CS13-10	CS13-15

Box mit 10 Stück / Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar
Box 10 units / Different sizes are available on request